

Wyrób medyczny klasy 1 zgodnie z MDR (UE) 2017/745.

Urządzenia te są przeznaczone do obsługi przez każdego, kto jest w stanie przeczytać i zrozumieć instrukcje użytkowania.

Profil pacjenta: Każdy rodzaj pacjenta, którego patologia wymaga zastosowania urządzenia wspomagającego zapobieganie i/lub leczenie odleżyn.

Profil operatora w zakresie instalacji, wdrożenia, regulacji i konserwacji: Pacjent, pracownicy służby zdrowia, konserwatorzy, osoby trzecie. Nie ma szczególnych ograniczeń dotyczących obsługi i użytkowania urządzenia.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Gama urządzeń wielofunkcyjnych, które mogą być używane zarówno do pozycjonowania, jak i do zapobiegania i leczenia odleżyn.

WSKAZANIA

Ich uniwersalność pozwala na stosowanie ich w różnych pozycjach: podparcie pacjenta, odciążenie pięt, ustawienie kończyn dolnych w pozycji pół-ptaszka lub z pacjentem na boku, czy ochrona punktów styku (łokcie kolana, kostki itp.)

Wybór urządzenia musi być zatwierdzony przez pracownika służby zdrowia.

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Urządzenia ze zintegrowaną osłoną POLYMAILLE® / POLYMAILLE®HD mogą być używane u jednego lub wielu pacjentów. Można je regenerować zgodnie z instrukcją produktu oraz instrukcjami czyszczenia i dezynfekcji.

Pierwszy środek zapobiegawczy przeciwko odleżynom: ciało należy podnosić jak najczęściej, aby ograniczyć kompresję naczyń krwionośnych, a tym samym umożliwić prawidłowe krążenie krwi.

PRZECIWSKAZANIA

Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem i wskazaniami. Nie stosować w przypadku uczulenia na poliuretan. W przypadku jakichkolwiek problemów należy skonsultować się z lekarzem.

EFEKTY UBOCZNE

Nie ma żadnych niepożądanych skutków ubocznych. Jednak pacjent może odczuwać skutki nieodłącznie związane z zanurzeniem: możliwe (ograniczone) zmniejszenie percepcji i mobilności. Zwiększone odczuwanie ciepła.

WYDAJNOŚĆ URZĄDZEŃ

Umożliwiają odciążenie obszarów wsparcia poprzez zanurzenie lub rozładowanie. Pomaga w utrzymaniu pozycji w łóżku.

KORZYŚCI KLINICZNE

Popraw dotlenienie tkanek w strefie kontaktu.

INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

Stosuj pomoce do pozycjonowania lub urządzenia obniżające ciśnienie u pacjentów z odleżyną / odleżyną. Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednie dla środowiska pacjenta. Zapewnienie ciągłości leczenia.

PRZECHOWYWANIE, OBSŁUGA, TRANSPORT

- Najlepiej na płasko. Nie wystawiaj w pobliżu znaczącego źródła ciepła.
 - Ewentualnie w suchym i umiarkowanym miejscu chronionym przed ciepłem i światłem w torbie ochronnej.
 - Ostrożnie obchodź się z urządzeniem, aby nie uszkodzić pokrowca.
 - Transport w torbie transportowej lub w pudełku.
- Przy każdym przeładunku / transporcie należy przestrzegać poniższych wskazówek.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie używaj bez osłony.
- Nie umieszczaj żadnych obcych ciał między pacjentem a sprzętem poza ubraniem.
- Uważaj, aby nie uszkodzić obudowy. Obserwowano częste degradacje: oparzenia papierosami, zadrapania po zwierzętach, dziury po igłach, skaleczenia skalpelem lub ostrymi przedmiotami, uszkodzenia spowodowane użyciem sprzętu o ostrych krawędziach.
- Zalecamy zapewnienie dodatkowego pokrowca ochronnego.
- Nie używaj zapasowych pokryw, akcesoriów lub elementów innych niż dostarczone przez SYST'AM®.
- Patrz instrukcje „Czyszczenie i dezynfekcja”.
- Jeśli zaobserwujesz pogorszenie się jakości produktu (odkształcenie lub wyciek piany) lub efekt dna, skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Trzymaj z dala od źródeł łatwopalnych.
- Zgłaszaj swojemu opiekunowi tak szybko, jak to możliwe, wszelkie nietypowe zdarzenia, takie jak ból, zaczerwienienie lub wybielenie punktów podparcia.
- Każdy poważny incydent, który wystąpił w związku z urządzeniem, należy zgłosić producentowi i właściwemu lokalnemu organowi.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał amortyzujący mikrokulki: mikrokulki z drobnego spienionego polistyrenu (PS).

Materiał amortyzujący: włókna poliestrowe (PES).

Materiał wewnętrzny pokrowca: 100 % bawełny.

Materiał pokrowców: POLYMAILLE®: powłoka poliuretanowa na dżerseju.

PRZEWIDYWANY OKRES UŻYTKOWANIA

Żywotność tych produktów wynosi 5 lat, jeśli są używane ściśle według instrukcji dotyczących pielęgnacji i konserwacji. Żywotność może być dłuższa, jeśli produkt jest konserwowany ostrożnie i znacznie skracana przez ekstremalne lub niewłaściwe użytkowanie. Nie stanowi to dodatkowej gwarancji na te produkty.

GWARANCJA

Dwa lata w przypadku wad produkcyjnych, licząc od daty zakupu przez klienta. Drobne niedoskonałości (drobne rozdarcia, marmurkowanie, wady powierzchni itp.) powstałe w wyniku procesu produkcyjnego w żaden sposób nie wpływają na jakość i skuteczność produktu oraz nie mogą być powodem do wymiany produktu na gwarancji. Gwarancja nie obejmuje niewłaściwego użycia wspornika, normalnego zużycia urządzenia lub jego obudowy. W przypadku niewywiązania się z umowy, należy skontaktować się z dostawcą i podać mu numer partii produktu.

BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO

Nie spalaj ani nie wyrzucaj. Szanuj kanały recyklingu obowiązujące w Twoim kraju. Nie spożywaj. 0 % C.F.C. pianka. Zgodność z normami przeciwpożarowymi EN 597-1 i 597-2.



MD P9700B, P9701B, P9702B, P9703B, P9704B, P9705B, P9707B, P9708B, P9709B, P9710B, P9711B, P9712B, P9714B, P9750F, P9751F, P9752F, P9753F, P9754F, P9755F, P9757F, P9758F, P9759F, P9760F, P9761F, P9762F, P9763F, P9764F



Pomoce pozycjonujące z Mikrogranulkami/Włóknami INSTRUKCJA STOSOWANIA



SYSTEM ASSISTANCE MEDICAL SAS
ZAE - Route de Casseneuil - LE LEDAT
47300 VILLENEUVE SUR LOT - FRANCE
Tel. commercial : 05 53 40 23 50 - Fax commercial : 05 53 40 50 40
International phone + 33 553 40 50 30 - International fax + 33 553 40 58 38
www.system.com
Siret : 392 011 920 00015 - APE 331 B - FR 12 392 011 920


© SYST'AM®
08/2022
4737DV2



REF

P9700B1HW

0,30 kg - 0,65 lbs

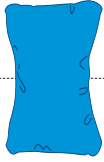

45 x 30 cm
17,7" x 11,8"

REF


P9750F1HW

0,23 kg - 0,50 lbs

REF

P9701B1HW

0,60 kg - 1,3 lbs

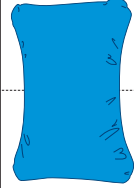

56 x 40 cm
22" x 15"

REF


P9751F1HW

0,60 kg - 1,3 lbs

REF

P9702B1HW

0,60 kg - 1,3 lbs

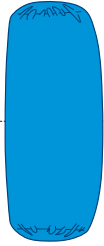

60 x 20 cm
23" x 7"

REF

P9752F1HW


0,68 kg - 1,5 lbs



REF

P9703B1HW

0,45 kg - 1 lbs

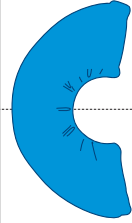

62 x 32 cm
24" x 12,4"

REF


P9753F1HW

0,42 kg - 0,9 lbs

REF

P9704B1HW

0,45 kg - 1 lbs

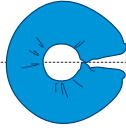

50 x 50 cm
19" x 19"

REF


P9754F1HW

0,53 kg - 1,1 lbs

REF

P9705B1HW

2,1 kg - 4,5 lbs

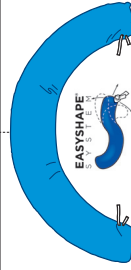

135 x 85 cm
52,5" x 33"

REF


P9755F1HW

1,8 kg - 3,9 lbs

REF

P9708B1HW

P9706B : 0,70 kg - 1,5 lbs
+ P9705B : 2,1 kg - 4,5 lbs

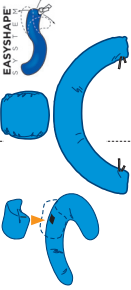

P9706F :
58 x 40 cm - 22,5" x 15"
+
P9705F :
135 x 85 cm - 52,5" x 33"


REF

P9758F1HW

REF

P9707B1HW

1,80 kg - 4 lbs

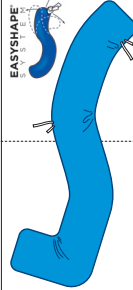

180 x 55 cm
71" x 21,6"

REF


P9757F1HW

2,10 kg - 4,6 lbs

REF

P9709B1HW

0,85 kg - 1,85 lbs

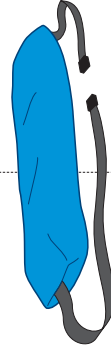

85 x 25 cm
33" x 10"

REF


P9759F1HW

0,79 kg - 1,74 lbs

REF

P9710B1HW

1,25 kg - 2,75 lbs

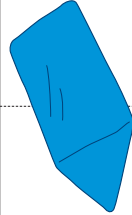

60 x 40 cm
23,6" x 15,7"

REF


P9760F1HW

0,90 kg - 1,98 lbs

REF

P9711B1HW

0,33 kg - 0,72 lbs

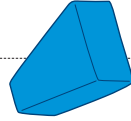

30 x 10-30 cm
12" x 4-12"

REF


P9716F1HW

0,26 kg - 0,57 lbs

REF

P9712B1HW

0,31 kg - 0,68 lbs

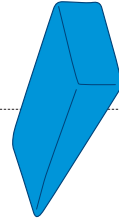

46 x 30 cm
18" x 12"

REF

P9762F1HW

0,30 kg - 0,66 lbs



50 x 38 cm
19,7" x 15"

REF


P9763F1HW

0,75 kg - 1,65 lbs

REF

P9714B1HW

0,13 kg - 0,28 lbs

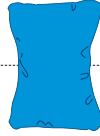

30 x 20 cm
11,8" x 7,8"

REF

P9764F1HW

0,10 kg - 0,22 lbs

