

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podpórka czterokołowa aluminiowa

z podparciem na nogi

Kod produktu TGR-R RA 888




1. Wykonanie

Podpórka czterokołowa, składana wykonana z ramy aluminiowej powlekanej farbą z metalicznym połyskiem. Posiada szerokie tapicerowane siedzisko, miękkie oparcie, składane podparcie pod nogi oraz zdejmowany koszyk. Wyposażona w regulowane na wysokość ręczki zakończone anatomicznymi uchwytami oraz hamulce z zaciskiem postojowym. Posiada koła o wąskim przekroju i średnicy 8". Zestaw zawiera: dwa uchwyty z hamulcami, ramę podpórki wraz z siedziskiem, oparcie, koszyk, śrubę blokującą z podkładkami - 2 szt.

Elementy podpórki:

- a. uchwyt
- b. hamulec
- c. śruba blokująca
- d. oparcie
- e. mocowanie oparcia
- f. koszyk
- g. zawias
- h. składane podparcie pod nogi
- i. górna regulacja hamulca
- j. dolna regulacja hamulca

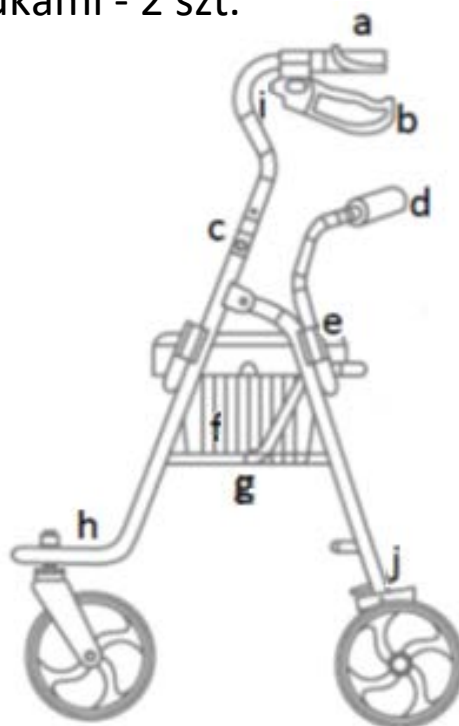

2. Zastosowanie

Podpórka czterokołowa jest sprzętem pomocniczym, przeznaczonym dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecana jest także dla osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie podpórki wpływa pozytywnie na powrót do aktywności

osób mających problemy z lokomocją lub pionizacją. Gwarantuje lepszą stabilność, podparcie i bezpieczeństwo podczas chodzenia.

3. Montaż

Rozłożenie i złożenie podpórki

- Aby rozłożyć podpórkę należy docisnąć belkę poprzeczną znajdującą się pod siedziskiem do momentu, aż zawiasy będą całkowicie rozłożone. Następnie zamontować uchwyty w otworach montażowych na odpowiedniej wysokości zakładając podkładki i dokręcając śruby blokujące, linki hamulców powinny znajdować się z przodu podpórki.
- Koszyk zamontować pod siedziskiem, a siedzisko należy oprzeć na rozłożonej ramie.
- Następnie zamontować oparcie w otworach montażowych z tyłu podpórki do momentu zablokowania sztyftów.
- Należy zdjąć plastikowe ochroniacze z kół.
- W przypadku korzystania z podpórki w celach chwilowego spoczynku należy rozłożyć podparcie pod nogi. Podczas wstawania z podpórki podparcie pod nogi należy złożyć.
- Aby złożyć podpórkę do transportu należy podnieść siedzisko, wyciągnąć koszyk następnie pociągnąć do góry taśmę łączącą belkę poprzeczną z ramą, aż do momentu całkowitego złożenia ramy.

Funkcja hamulców

- Aby zatrzymać podpórkę należy pociągnąć uchwyt hamulca do góry w kierunku uchwyty, następnie przytrzymać.
- W czasie postoju lub korzystania z siedziska należy zablokować hamulec zaciskiem postojowym pociągając uchwyt hamulca w dół.
- Aby zwolnić hamulec należy pociągnąć uchwyt hamulca w górę.

Regulacja wysokości uchwytów

Aby wyregulować wysokość uchwytów, należy odkręcić śruby blokujące znajdujące się na zewnętrznej stronie ramy, wybrać odpowiednią wysokość rurki i ponownie dokręcić śruby blokujące.

Regulacja hamulców

Górna regulacja hamulca: należy odkręcić uchwyt linki, podciągnąć ją na odpowiednią odległość i następnie zablokować poprzez dokręcenie śruby zaciskowej. **Dolna regulacja hamulca:** należy za pomocą klucza płaskiego poluzować śrubę mocującą, pociągnąć za czarną linkę hamulca tak, aby wyregulować naprężenie linki następnie dokręcić śrubę mocującą.

4. Specyfikacja techniczna

Szerokość całkowita	61 cm
Głębokość całkowita	80 cm
Wymiary siedziska	35 cm x 32 cm
Wysokość siedziska od podłoża	55 cm
Regulacja wysokości uchwytów	78-88 cm
Waga	8,2 kg
Max obciążenie	110 kg
Max obciążenie koszyka na zakupy	5 kg

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja










- Ramę podpórki należy czyścić wilgotną szmatką, a następnie dokładnie osuszyć.
- Nie należy używać ostrych środków polerskich, gdyż grozi to zniszczeniem powłok zabezpieczających.
- Należy na bieżąco usuwać zanieczyszczenia z ruchomych elementów podpórki (zawiasów, śrub zaciskowych, blokad).

7. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie

zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

8. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.

Dowiedz się więcej na: www.timago.com

Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



Wydanie II, data aktualizacji 29.03.2021