

50
LAT

Thomashilfen

PIONIER
OD 1969

Timago

NOWOŚĆ



do 80 kg

130 - 180 cm

Hercules Prime

Modułowy rehabilitacyjny fotelik samochodowy,
który przez długi czas rośnie wraz z użytkownikiem


Thomashilfen

THOMASHILFEN

Hercules Prime



” Potrzebne jest solidne rozwiązanie dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością fizyczną i neurologiczną - tak, aby zawsze byli bezpieczni w samochodzie.

Hercules Prime jest doskonałym rozwiązaniem w sytuacji, gdy foteliki rehabilitacyjne stały się zbyt małe lub potrzebne jest większe wsparcie podczas siedzenia w samochodzie. Jako modułowy fotelik pozycjonujący, który rośnie wraz z użytkownikiem, oferuje znane funkcje fotelika samochodowego osobom wymagającym rehabilitacji, a szeroki zestaw akcesoriów umożliwia dostosowanie do indywidualnych potrzeb pasażera. Gdy wymagane jest szczególnie mocne podparcie głowy i górnej części ciała, zwykły system pasów samochodowych nie wystarcza.

Fotelik Hercules Prime to wygodna, bezpieczna pozycja siedząca podczas każdej podróży. ““

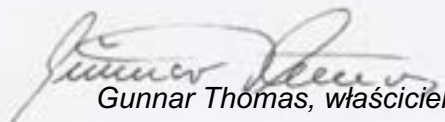


Oczywisty wybór w przypadku

- wszystkich schorzeń, które ograniczają kontrolę mięśni szkieletu



Thomashilfen od ponad 30 lat zapewnia dzieciom ze specjalnymi potrzebami foteliki rehabilitacyjne. Dziś wykorzystujemy również nasze know-how do opracowania własnych fotelików rehabilitacyjnych dla dzieci i dorosłych. W nich zawiera się całe nasze wieloletnie doświadczenie związane z potrzebami użytkowników i ich bliskich.


Gunnar Thomas, właściciel



Z całkowicie nowymi FUNKCJAMI



dla wysokości
ciała
130 – 180 cm



WYSOKOŚĆ OPARCIA

Dzięki bezstopniowej regulacji wysokości oparcia o 13 cm, możliwe jest dostosowanie się do wzrostu użytkownika w dowolnym momencie. Głowa jest podparta w optymalnej pozycji.

Duży wybór akcesoriów, które rosną wraz z użytkownikiem, pozwala na długi okres użytkowania.

Na ilustracji widać też akcesoria



SZEROKOŚĆ OPARCIA

Zarówno smukły jak i krępy użytkownik o szerokości ramion od 42 do 51 cm przez cały czas siedzi dobrze podparty.

Prowadnice ramion (akcesoria) rosną wraz z użytkownikiem i można je rozsuwać w szerokim zakresie i indywidualnie dostosowywać z każdej strony, nawet nierównomiernie.

PROWADNICA PASA

za pomocą 3-punktowego pasa bezpieczeństwa pojazdu pozwala łatwo i szybko zamontować fotelik pozycjonujący z prawej lub lewej strony.



PELOTY BOCZNE TUŁOWIA

podtrzymują górną część ciała i są indywidualnie regulowane (akcesoria). Dostępne są też inne akcesoria, które rosną wraz z użytkownikiem, aby wspierać i pozycjonować górną część ciała.



TAPICERKA

Gruba tapicerka zapewnia wygodę, nie powoduje podrażnień i chroni przed nadmiernym poceniem. Przewiewny pokrowiec można całkowicie zdjąć i wyprać w temperaturze 40°C.

ZAPIĘCIE PASÓW

Pasy naramienne można oddzielnie zapiąć w klamrze, co jest dużym ułatwieniem dla opiekunów.



5-PUNKTOWA UPRZAŻ

Miękkie ochraniacze na ramiona dodatkowo podtrzymują korpus i ułatwiają przyjęcie odpowiedniej pozycji siedzącej podczas jazdy – długość pasa można szybko wyregulować za pomocą dwóch klamer.


NAKŁADKA PCHWINOWA

zasłania klamrę i zmniejsza nacisk jej pasa na wrażliwą okolicę brzucha.

GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA

bezstopniowa regulacja o 6 cm, indywidualne dopasowanie do wzrostu użytkownika.





PODUSZKA ZAGŁÓWKA
to większy komfort siedzenia i wygodne, miękkie podparcie głowy.



SZEROKOŚĆ OPARCIA
można indywidualnie regulować za pomocą prowadnic ramion (akcesoriów) – również asynchronicznie, jeśli jest to wymagane.



WYSOKOŚĆ OPARCIA
można regulować bezstopniowo, dzięki czemu fotel dostosowuje się do użytkownika i pozwala na długi czas użytkowania.

KĄT OPARCIA
można regulować bezstopniowo, odpowiednio do oparcia – nie potrzeba narzędzi, wystarczą dwa ruchy, aby przedstawić dwie czerwone dźwignie.



PODUSZKA SIEDZISKA
cehuje się szeroką powierzchnią siedzenia (38 cm), co ważne dla dużych użytkowników oraz ułatwia wsiadanie i wysiadanie z fotelika. Jest to też ułatwienie dla rodziców i opiekunów umożliwiające łatwy dostęp do pleców.

AKCESORIA - indywidualne, wygodne i rosnące wraz z użytkownikiem

► Funkcjonalne podstawy



OBRACANIE

ułatwia przenoszenie, fotelik pozycjonujący można obrócić w lewo lub w prawo

Aby móc poradzić sobie z przenoszeniem coraz cięższych użytkowników ze specjalnymi potrzebami, funkcja obrotowa jest prawdziwą ulgą dla pleców opiekunów. Obrót można zmienić z lewej strony na prawą. Aby zapobiec niezamierzonemu zwolnieniu podczas jazdy zaczep jest celowo zamontowany z tyłu.



PRZECHYLANIE

umożliwia stopniowe przechylenie fotelika, zapewniając zrelaksowaną pozycję spoczynkową podczas jazdy

W przypadku słabej górnej części ciała i braku kontroli głowy (hipotonia, „opadająca głowa”), regulowane pochylenie oparcia fotelika jest ważnym wsparciem, aby zapobiec „przewróceniu się do przodu”. Użytkownik spoczywa siedząc w zrelaksowanej pozycji i nie musi wykonywać żadnych forsownych czynności, aby się przytrzymać. W razie potrzeby można ustawić odpowiedni kąt pochylenia.

► Stabilność fotelika rehabilitacyjnego



SEATFIX (za siedzeniem)

utrzymuje fotelik bezpiecznie na miejscu podczas podróży, nawet gdy nie ma w nim użytkownika



PAŁĄK STABILIZUJĄCY

zapewnia bezpieczne utrzymanie fotelika na miejscu, gdy nie ma uchwytu Isofix



PODPÓRKA gwarantuje

stabilne trzymanie fotelika w okolicy stóp

Sz szczególnie podczas korzystania podczas codziennego użytkowania z funkcji obracania i przechylenia, fotelik pozycjonujący jest narażony na dodatkowe obciążenie. W celu ułatwienia obsługi i większego bezpieczeństwa użytkowników i opiekunów należy stosować pomocne akcesoria przeznaczone do stabilizacji fotelika pozycjonującego w samochodzie.

► Bezpieczne wsparcie dla głowy i stóp



ZAGŁÓWEK

zapewnia prawidłowe ułożenie głowy oraz bezpieczne i niezawodne jej utrzymanie



DRUGA PROWADNICA PASA (górną)

jako wygodna opcja do korzystania z 3-punktowego pasa bezpieczeństwa po prawej lub lewej stronie



PODNOŻEK (składany)

pomaga wsiadać i wysiadać z fotelika oraz zapobiega wyslizgiwaniu się z siedzenia (regulowana wysokość i kąt)

Hercules Prime

Festigkeitsnachweis durch Crashtest in Anlehnung an
ECE R 44/04
Test-Nr. S220201001

Proof of strength by crash test in accordance to
ECE R 44/04
Test-Nr. S22020100

TEST ZDERZENIOWY

przeprowadzony zgodnie z ECE R 44/04 i zakończony pomyślnie potwierdza wytrzymałość fotelika

Hercules Prime



Wszystkie szczegóły online:
www.thomashilfen.com/hercules-prime



► Dobra pozycja siedząca



PELOTY BOCZNE TUŁOWIA (stałe)

zapewniają mocne
podparcie boczne tułowia
i podtrzymują klatkę
piersiową



PELOTY BOCZNE TUŁOWIA (odchylane)

zapewniają mocne boczne
podparcie klatki piersiowej
i ułatwiają przenoszenie



PROWADNICA GÓRNEJ CZĘŚCI CIAŁA (stała)

zapewnia mocne podparcie
boczne na dużym obszarze
i podtrzymuje górną
część ciała



PROWADNICA GÓRNEJ CZĘŚCI CIAŁA (odchylana)

zapewnia
mocne podparcie boczne
na dużym obszarze górnej
części ciała i ułatwia
przenoszenie



PROWADNICA RAMION

umożliwia zmienne
podparcie obszaru
barkowego na szerokość
– również asynchronicznie



KLIN ODWODZĄCY

poprawia ułożenie nóg
i zapobiega krzyżowaniu się
nóg



PROWADNICE NÓG (lewa i prawa)

podtrzymują stabilną
pozycję siedzącą,
a także zapewniają
niezbędne podparcie ud

► Bezpieczeństwo użytkownika i ochrona pojazdu



SPINKA DO PASÓW

zatrzymuje niebezpieczne
skręcanie pasów i zapewnia,
że pasy pozostają na swoim
miejscu



**PODUSZKA POD
PODSTAWĘ** zapewnia
maksymalną powierzchnię
styku między siedzeniem
pojazdu a podstawą fotelika
w celu ułatwienia
przenoszenia



MATA ZABEZPIECZAJĄCA SIEDZISKO

oraz oparcie
chroni siedzenie pojazdu i jest
wyposażona z przodu w trzy
praktyczne kieszenie
na drobiazgi

Pełny przegląd akcesoriów
można znaleźć w formularzu
zamówienia na naszej
stronie internetowej:
www.thomashilfen.com

DUŻY STAJE SIĘ MAŁY I PORĘCZNY



W kilku prostych krokach można duży fotelik pozycjonujący szybko złożyć do małego, poręcznego pakunku.

To nie tylko ułatwia instalację w pojeździe. Fotelik pozycjonujący można również łatwo transportować w małych samochodach i można go gdzieś schować, aby zaoszczędzić miejsce.



TYLKO 52 x 21 x 73 cm

W CODZIENNYM UŻYTKOWANIU



Po umieszczeniu w pojeździe wyreguluj fotelik pozycjonujący.

Najwyżej wysunięty punkt oparcia fotelika powinien znajdować się odległość nie mniej niż 5 cm między czubkiem głowy a podsufitką, co pozwoli nawet wysokim użytkownikom ciągle siedzieć wygodnie.



YouTube

Obejrzyj wideo:

Jak Hercules Prime jest instalowany szybko i łatwo w Twoim samochodzie

Wymiary i wagi	Hercules Prime
Głębokość siedziska	40 - 46 cm
Szerokość siedziska	38 cm
Wysokość oparcia (wnętrze fotelika)	67 - 80 cm
Szerokość oparcia (siedzenie)	45 cm
Wysokość ramion (prowadnica pasa)	42 - 64 cm
Szerokość ramion (z prowadnicą ramion)	42 - 51 cm
Kąt oparcia (maks.)	120°
Pochylenie oparcia (model podstawowy)	0°
(z podstawą uchylną 10°)	0° / 2,5° / 5° / 7,5° / 10°
(z podstawą uchylną 20°)	10° / 12,5° / 15° / 17,5° / 20°
Długość dolnej części nogi (z podnóżkiem)	17 - 43 cm
Wysokość pelot bocznych tułowia (górną krawędź)	26 - 36 cm
Odległość pelot bocznych tułowia (maks.)	35 cm
Maks. wymiary całkowite (szer. x wys. x gł.)	52 x 88 x 43 cm
Maks. wymiary po złożeniu (szer. x wys. x gł.)	52 x 21 x 73 cm
Waga fotelika (model podstawowy)	12,3 kg
Wysokość ciała użytkownika	130 - 180 cm
Maks. Waga użytkownika	80 kg

Cechy standardowe:

Oparcie ze zintegrowaną regulacją wysokości; siedzisko ze zintegrowaną regulacją głębokości siedzenia; płynna regulacja kąta oparcia z dźwignią szybkiego zwalniania; oddychająca tapicerka z trudnopalnej tkaniny obiciowej; poduszka pod głowę, poduszka oparcia, poduszka miednicy, poduszka siedziska, nakładka pachwinowa; 5-punktowy pas wraz z ochraniaczami na ramiona; prowadnica pasa dla 3-punktowego pasa samochodowego (może być używana po prawej lub lewej stronie); przygotowane opcje montażu dla wszystkich akcesoriów; zdejmowane poszewki, można prać w pralce do 40°C

**GMFCS
Level
III-V**