

XFamily²

Generation² - Świetna funkcjonalność i wygląd



To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Możesz polegać na Breezy!

Nowa, udoskonalona seria Breezy XFamily² wzmocni Twój biznes.
Efektywność, która się opłaca.

Breezy to po prostu wiarygodność.

Solidne materiały, bezpieczne przemieszczanie się w każdym terenie oraz atrakcyjna cena w połączeniu z dobrą jakością.

Udoskonalona funkcjonalność dla lepszego pozycjonowania użytkownika w wózku i zwiększenia jego bezpieczeństwa.

Wszystkie produkty z serii XFamily² poddane były „crash testom” zgodnie z normą ISO 7176-19.




Rodzina Breezy XFamily²!

Zoptymalizuj zarządzanie flotą.

Dziewięć modeli wózków – jedna koncepcja. Wymiana części i wyregulowanie wózka zgodnie z indywidualnymi potrzebami zajmuje tylko chwilę.


Zalety dla Ciebie:

- Kompletna specjalistyczna oferta detaliczna – będziesz mógł oferować pełne spektrum produktów
- Wspólne części zapewniają optymalizację kosztów
- Łatwy w ponownym użyciu zapewnia dużą elastyczność
- Zmiana konfiguracji i ustawień wózka nigdy nie była tak prosta i szybka
- Niskie zapasy magazynowe oznaczają mniejszą wartość zamrożonego kapitału
- Mniejszy wysiłek związany z obsługą – szybsze rezultaty

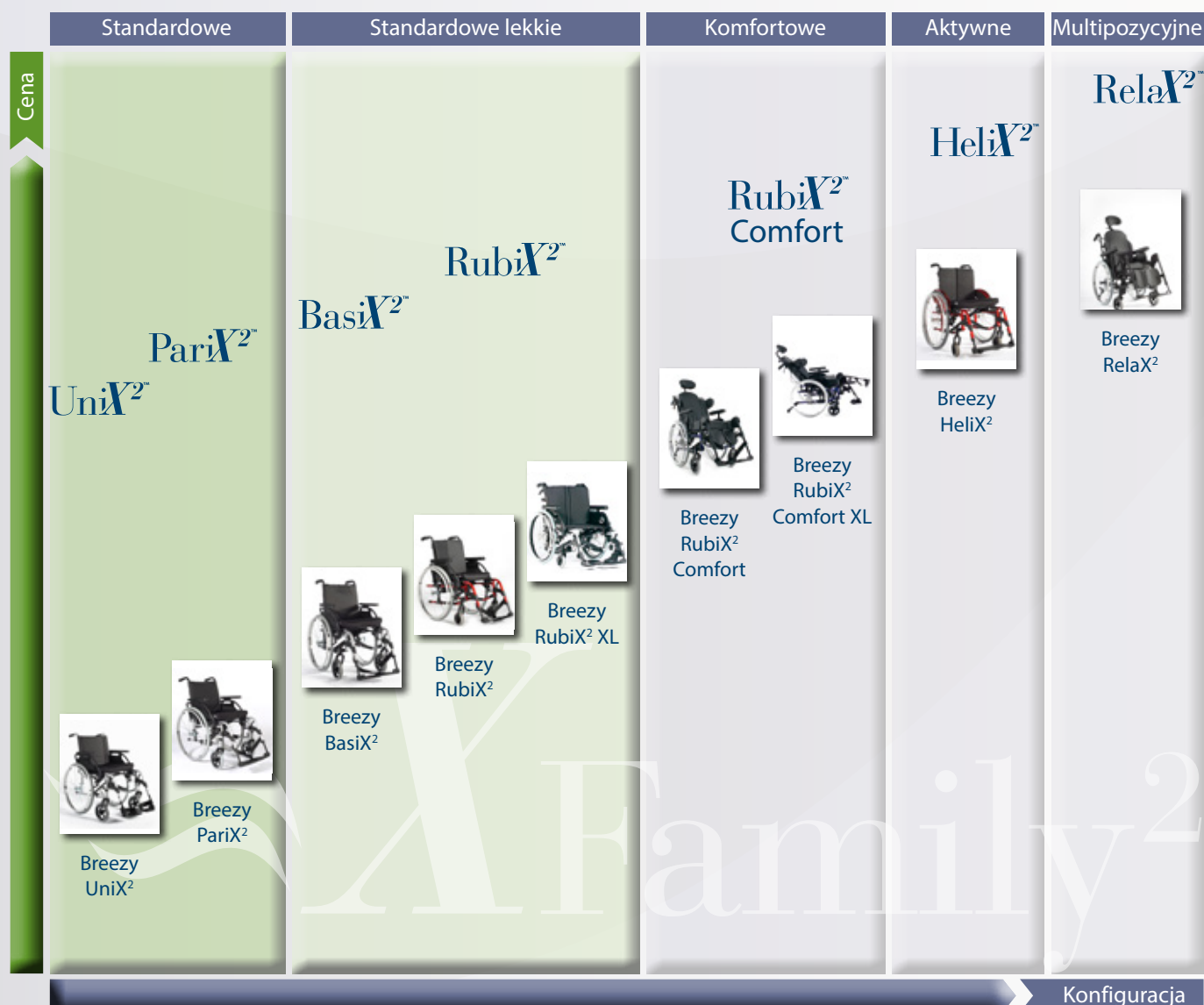

Maksymalne wykorzystanie części wspólnych dla zoptymalizowanej ekonomii i perfekcyjnego zarządzania flotą.

Zaskakująco prosty, a jednocześnie tak genialny: zasada Breezy XFamily² Mini-Max. Szeroki wybór części wspólnych oznacza, że przy mniejszych zapasach magazynowych nadal można zaoferować wysoki poziom elastyczności.

|  | Breezy UniX ² | Breezy PariX ² | Breezy BasiX ² | Breezy RubiX ² |
|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Podnózek | ● | ● | ● | ● |
| Unoszone podnóżki (ELR) | ● | ● | ● | ● |
| Podpórka dla amputantów | ● | ● | ● | ● |
| Podłokietniki | - | ● | ● | ● |
| Osłona boczna z regulacji wysokości (wersja stand.) | ● | ● | ● | ● |
| Osłona boczna z regulacją wys. (centralne wsparcie) | - | - | ● | ● |
| Blokada kół | ● | ● | ● | ● |
| Przedłużenie dźwigni ham. | ● | ● | ● | ● |
| Koła przednie 6"/8" | ● | ● | ● | ● |
| Std koła tylne 22"/24" | ● | ● | ● | ● |
| Koła 22"/24" z ham. bębnowym | ● | ● | ● | ● |
| Tapicerka siedziska typu HeliX | ● | - | - | - |
| Tapicerka siedziska typu BasiX | - | ● | ● | ● |
| Kółka antywywrotne | ● | ● | ● | ● |
| Osłona szprych | ● | ● | ● | ● |
| Pas pozycjonujący | ● | ● | ● | ● |

- Minimalny wysiłek przy obsłudze, maksymalna wymiennosc części i modeli
- Minimalny poziom zapasów części zamiennych, maksymalne dopasowanie.
- Minimalny poziom formalności przy zamówieniu, maksymalny poziom zysku

Zasada Mini-Max przekona Cię nie tylko dzięki szerokiemu zakresowi działania, ale również dlatego, że Tobie to też się opłaca.

Produkty są dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb, a koszty odnoszące się do całego cyklu życia produktu pozostają na niskim poziomie.

| | Breezy RubiX ² XL | Breezy RubiX ² Comfort | Breezy RubiX ² Comfort XL | Breezy Helix ² | Breezy RelaX ² |
|--|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● | - |
| | ● | ● | ● | ● | - |
| | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● | - |
| | ● | ● | ● | ● | - |
| | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● | ● |
| | - | - | - | - | - |
| | ● | ● | ● | ● | - |
| | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● | ● |

XFamily²





UniX²



Trwałość i wiarygodność.

Solidna, niezawodna konstrukcja objęta pełną gwarancją.

Zapewnia mobilność zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz.



Odchylane podłokietniki z regulowaną poduszką długą i krótką.



Dwie regulowane wysokości siedziska.



Podnoszone podnóżki - ELR (opcja).

XFamily²

PariX²TM



Połączenie stali i aluminium
zwiększa sztywność ramy.
Największa możliwość
regulacji w swojej klasie.



Płytkę osi zapewnia elastyczność w
doborze wysokości siedziska oraz
pozycji tylnego koła.



Regulowany kąt koła przedniego (0° i
3°). Ulepszone mocowanie koła



Krótką i długą komfortową poduszkę
podłokietnika w jednym.



BasiX²[™]

Zwiększona możliwość regulacji i sztywność ramy w połączeniu z bardziej nowoczesnym wyglądem!



Nowa rama o lepszym wyglądzie z większą możliwością regulacji głębokości siedziska (od 41 do 46 cm)



Tapicerka z regulacją naprężenia, teraz regulowana od 41 do 46 cm.



Nowe solidne mocowanie koła przedniego zapewnia większą sztywność i lepszy wygląd (0°, 3° i 6°).

RubiX²

Duży wybór opcji klinicznych zawierających rozwiązania dla hemiplegików, oparcia z regulacją odchylenia i regulacją kąta, komfortowe siedziska i produkty z serii Jay pozwala dostosować wózek do potrzeb szerokiego grona użytkowników.



Nowoczesny wygląd i solidny trójramienny krzyżak.



Komfortowe siedzisko i odchylane oparcie (opcja) umożliwia długotrwałe korzystanie z wózka.



Oparcie z regulacją naprężenia na czterech pasach, regulowane na wysokość od 41 do 46 cm.



RubiX² XL

RubiX² XL jest odpowiedni dla użytkowników o dużej wadze. W modelu tym zwiększono szerokość siedziska do 60 cm i maksymalną wagę użytkownika do 170 kg.



Nowe solidne mocowanie koła przedniego zapewnia większą sztywność i lepszy wygląd (0°, 3° i 6°).



Solidny i trwały czteroramienny krzyżak



Hamulec bębnowy (opcja).

HeliX²TM



Konfigurowalny wózek aktywny, który łączy siłę wózka RubiX² z opcjami dostosowanymi do potrzeb użytkowników o aktywnym stylu życia.



Tapicerka oparcia z regulacją naprężenia i oparcie z regulacją wysokości od 35 do 50 cm dla zapewnienia optymalnej ergonomii i komfortu (w standardzie).



Oparcie z regulacją kąta dostosowane do potrzeb aktywnych i półaktywnych użytkowników (opcja).



Wybór lekkich stylowych kół przednich, kół tylnych i opon dla aktywnych użytkowników




Relax²[™]

Nowoczesny wygląd, duży komfort i funkcjonalność. Wózek, który dzięki swojej elastyczności, możliwości regulacji i dużemu

wyborowi
opcji,
stanowi

perfekcyjne
rozwiązanie
dla

użytkownika.

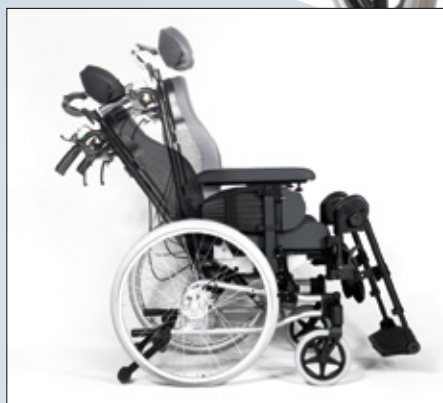

Optymalna pozycja zapewniona dzięki odchylanemu oparciu. Odchylenie w zakresie 0° - 35°. Odchylenie siedziska w zakresie -3° - 25°.



Dostosowanie do zmieniających się potrzeb dzięki regulowanej głębokości siedziska. Regulacja od 42 do 50 cm.



Nowe, ulepszone podnoszone podnóżki (ELR) zwiększają funkcjonalność i poprawiają wygląd wózka.

Opcje i akcesoria

Seria XFamily² oferuje szeroki wybór opcji, ustawień i możliwości regulacji



Uchwyty z regulacją wysokości



Odchylane oparcie (30° bezspotniowej regulacji)



Oparcie składane



Kółka antywywrotne (odchylane, regulowane)



Hamulce bębnowe



Podłokietnik z regulacją wysokości z podkładką przesuwaną do długiej i krótkiej pozycji



Podnoszone podnóżki (ELR)



Składana poprzeczka stabilizująca



Podkładka dla amputantów




Seria XFamily² jest zaprojektowana w sposób zapewniający użytkownikowi optymalny komfort poprzez użycie różnorodnych systemów siedzisk i oparć. Komfortowe siedziska i oparcia doskonale dopasowują się do wszystkich indywidualnych potrzeb. Z serią Jay można stworzyć optymalne rozwiązanie, które pozwoli na poprawne utrzymanie postawy i stworzy stabilne wsparcie.



Poduszka Jay Basic jest przeznaczona dla użytkowników o symetrycznej budowie z niskim ryzykiem wystąpienia problemów skórnych, którzy wymagają komfortowego i łagodnego wsparcia postawy.



Poduszka Jay Soft Combi P jest przeznaczona dla użytkowników o symetrycznej budowie z niskim ryzykiem wystąpienia problemów skórnych, którzy wymagają umiarkowanego wsparcia postawy.

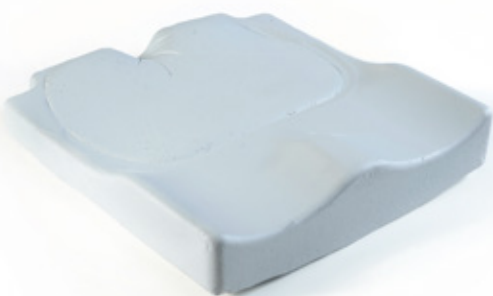

Poduszka Jay Easy Visco jest lekką poduszką, dającą wysoki poziom komfortu i stabilizacji.



Płytki kontur
(SC)



Średni kontur
(MC)



Głęboki kontur
(DC)




Środkowy
głęboki kontur
(MDC)

Oparcia Jay 3 tworzą systemy wsparcia i pozycjonowania. Duży wybór kształtów i rozmiarów umożliwia dopasowanie oparcia do potrzeb użytkownika

Rodzina Breezy XFamily²!

Duży wybór wspólnych części zamiennych, zoptymalizowane koszty.



|  | Breezy UniX ² | Breezy PariX ² |
|---|--------------------------|---------------------------------------|
| Szerokość siedziska | 38 - 50 cm | 38 - 52 cm |
| Głębokość siedziska | 42 cm | 42.5 cm |
| Wysokość siedziska | 47 - 51 cm | 46 - 51 cm |
| Kąt siedziska | 3° | 0° i 3° |
| Wysokość oparcia | 40 - 42 cm | 41 - 43 cm |
| Kąt oparcia | 12° | 12° |
| Bezpieczny kąt nachylenia | 10° | 10° |
| Regulacja środka ciężkości | – | 3,5 cm do -3,5 cm |
| Regulacja tapicerki oparcia | – | Tak |
| Podłokietnik | Krótki i długi | Reg. wys. narzędziami, krótki i długi |
| Kolor | Srebrny | Srebrny |
| Waga wózka | od 18 kg | od 16.6 kg |
| Maks. waga użytkownika | 125 kg | 125 kg |




| | Breezy BasiX ² | Breezy RubiX ² | Breezy RubiX ² XL |
|--|---------------------------------------|---|---|
| | 38 - 52 cm | 38 - 52 cm | 52 - 60 cm |
| | 43,5 cm (41 - 46 cm regulowana) | 41 - 51 cm | 41 - 51 cm |
| | 42,5 - 51 cm | 37,5 - 53 cm | 37,5 - 51 cm |
| | 0° do 6° | 0° do 6° | 0° do 6° |
| | 43,5 cm (41 - 46 cm regulowana) | 43,5 cm (41 - 46 cm regulowana) | 43,5 cm (41 - 46 cm regulowana) |
| | 12° (7° - 30° z odchylanym oparciem) | 12° (-5° - 20° z odchylanym oparciem) | 12° (-5° - 20° z odchylanym oparciem) |
| | 10° | 10° | 10° |
| | 5 cm do -5 cm | 5 cm do -5 cm | 5 cm do -5 cm |
| | Tak | Tak | Tak |
| | Reg. wys. narzędziami, krótki i długi | Reg. wys. narzędziami, krótki i długi przesuwny | Reg. wys. narzędziami, krótki i długi przesuwny |
| | Srebrny | Srebrny, niebieski, czerwony | Srebrny, niebieski, czerwony |
| | od 14,9 kg | od 15,5 kg | od 16,8 kg |
| | 125 kg | 125 kg | 170 kg |

Rodzina Breezy XFamily²!

Duży wybór wspólnych części zamiennych, zoptymalizowane koszty.



|  | Breezy RubiX ² Comfort | Breezy Helix ² |
|---|--|---------------------------------------|
| Szerokość siedziska | 38 - 52 cm (52 - 60 cm wersja XL) | 38 - 52 cm (52 - 60 cm wersja XL) |
| Głębokość siedziska | 41 - 48,5 cm | 41 - 51 cm |
| Wysokość siedziska | 37,5 - 53 cm (37,5 - 51 cm wersja XL) | 35,5 - 53 cm (37,5 - 51 cm wersja XL) |
| Kąt siedziska | 0° do 6° | 0° do 6° |
| Wysokość oparcia | 46 cm | 35 - 50 cm |
| Kąt oparcia | 7° do 30° regulowany | 12° (-5° do 20° kąt regulowany) |
| Bezpieczny kąt nachylenia | 10° | 10° |
| Regulacja środka ciężkości | 5 cm do -5 cm | -5 cm to 7.5 cm |
| Regulacja tapicerki oparcia | Tak (opcjonalne oparcie komfortowe) | Tak |
| Podłokietnik | Reg. wys. narzędziami, krótki i długi przesuwany | Regulacja wysokości, krótki i długi |
| Kolor | Srebrny, niebieski, czerwony | Srebrny, niebieski, czerwony, czarny |
| Waga wózka | od 15,5 kg / XL Version from 16,8 kg | od 15.3 kg / XL Version from 16.3 kg |
| Maks. waga użytkownika | 125 kg / wersja XL do 170 kg | 125 kg / wersja XL do 170 kg |



Breezy
RelaX²

41(37 - 43), 46(42 - 48), 51(47 - 53) cm, 53 cm wersja XL)

42 - 50 cm (płynnie)

42.5 - 50 cm

0° do 25° / -3°- 22°

55 - 60 cm

0° to 35° (płynnie)

10°

-


-

Reg. wysokości/głębokości, przesuwany

Srebrny

od 34 kg

145 kg (170 kg wersja XL)

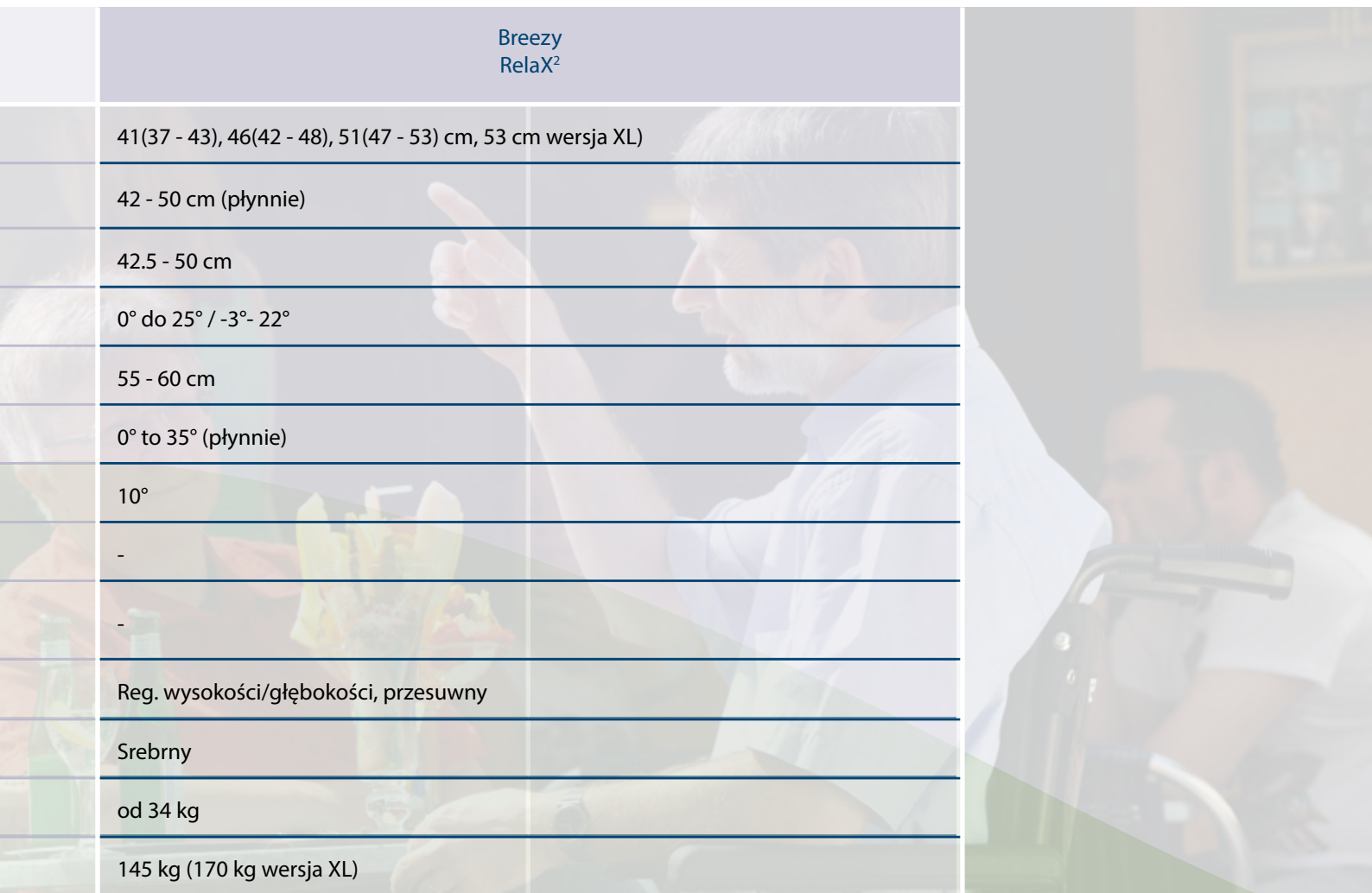



 **Breezy**[®]
Premium products. Quality service.

Wszystkie produkty z serii Breezy XFamily² przeszły „crash testy” zgodnie z normą ISO7176-19 i dlatego są dopuszczone do przewożenia w pojazdach ludzi siedzących na wózkach.



Producent:
Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4, Germany
D-69254 Malsch / Heidelberg
Tel. +49 (0)7253 980-0

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

Elektronowa 6
94-103 Łódź
Tel: +48 42 275 83 38
Fax: +48 42 209 35 23
E-Mail: pl@sunrisemedical.pl
www.Sunrise-Medical.pl